

People have Priority



Sterilizacija, higijena i održavanje



Sterilizacija, higijena i održavanje

Higijenski standardi na vrhunskoj razini

Sterilizacija, higijena i održavanje u pobjedonosnom pohodu na dentalne ordinacije! W&H nudi potpuno higijensko rješenje za održavanje Vaših nasadnika, koljičnika i turbina.



Točan tijek rada za pripremu rotacijskih instrumenata i mikromotora možete pronaći na stranici wh.com.

0 W&H	4 – 5
Pregled proizvoda 1 za Assistina 3x3, Assistina 301 plus, Assistina 3x3 i Lisa Brzi ciklus	6 – 7
Pregled proizvoda 2 za Lisa, Lina, Multidem	8 – 9
Assistina 3x3 / 3x2	10 – 11
Assistina 301 plus	12 – 13
Assistina 3x3 i Lisa Brzi ciklus	14 – 15
Lisa	16 – 17
Lina	18 – 19
Mogućnost praćenja	20 – 21
Pribor za proizvode Lisa i Lina	22 – 23
Seal ²	24 – 25
Multidem	26 – 27
Osmo, Dist, Prim	28 – 29
W&H set adaptera za uređaje za čišćenje i dezinfekciju	30
Tehnički podaci	31 – 33
Pregled sustava adaptera	34 – 35



W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)



W&H Sterilization
Brusaporto (I)

Puno je toga na kocki. Radi se o ljudima.

Za zdrav razvoj neophodno je razmišljati unaprijed. To vrijedi i za sterilizaciju, higijenu i održavanje, kao i za W&H: Mi kao obiteljska tvrtka već generacijama razmišljamo unaprijed i djelujemo u skladu s tim.

Tajna našeg uspjeha: W&H uvijek stavlja ljude – bilo da se radi o partnerima, klijentima, pacijentima ili zaposlenicima – u prvi plan. Sasvim je logično da nas kritički priupitate: Provođi li se to i u svakodnevnom radu? Naš prijedlog: Isprobajte nas!



People have Priority

W&H na prvi pogled

- > Sjedište tvrtke u Austriji
- > 1000 zaposlenika diljem svijeta
- > 80 timova
- > Tvrtku osnovali Jean Weber i Hugo Hampel 1890. u Berlinu
- > 3 tvornice
- > 19 tvrtki kćeri u Europi i Aziji
- > Udio izvoza iznosi više od 95 %

Više informacija možete pronaći na wh.com

PEOPLE HAVE PRIORITY



Što god da vam se dogodi,
uz W&H program higijene i održavanja
spremi ste za sve izazove.

Od sada kod vašeg trgovca dentalne opreme ili na wh.com



»S automatskim vanjskim čišćenjem, Assistina 3x3 prvi je izbor za pripremu turbina, nasadnika i koljičnika za sterilizaciju.«

Dr. Klaus Kohlpaintner,
stomatolog s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Automatsko unutarnje čišćenje (dijelova pogona i unutarnjih komponenti)
- > Automatsko čišćenje (Assistina 3x3)
- > Savršeno podmazivanje instrumenata
- > Kratko trajanje ciklusa od 6 minuta
- > Jednostavna uporaba
- > Optimalan omjer uloženog – dobivenog
- > Ovjereni proces

Assistina 3x3 / 3x2



Više informacija
od stranice 11



»Assistina 301 plus – dugotrajna i pouzdana podrška mojim zaposlenicima pri podmazivanju instrumenata.«

Dr. Florian Gierl,
stomatolog s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Automatsko rotacijsko podmazivanje
- > Automatsko doziranje ulja
- > Optimalno podmazivanje instrumenata
- > Čišćenje unutarnjih komponenti sredstvom za čišćenje
- > Ispuhivanje i sušenje komprimiranim zrakom

Assistina 301 plus



Više informacija
od stranice 13



»Assistina 3x3 i Lisa idealna su kombinacija za brzu pripremu instrumenata.«

Dr. Regina Becker,
stomatolog s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Kraće vrijeme pripreme instrumenata
- > 6 minuta u uređaju Assistina 3x3
- > 14 minuta u Lisa brzom ciklusu
- > Nakon 20 minuta: očišćeni, pripremljeni i sterilizirani instrumenti

Assistina 3x3 i Lisa Brzi ciklus

Više informacija
od stranice 15



»Imam već dva sterilizatora Lisa. Ne samo zato što su uređaji tako tihi nego i zato što su se dokazali u svakodnevnom radu.«

Dr. Jörg Pinder,
stomatolog s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Prilagođeni automatski ciklusi
- > Integrirani automatski sustav sljedivosti
- > Ugrađena memorijska kartica
- > Patentirani sustav za odvajanje vode i filter sistem
- > Ugrađeni filter za prašinu za zaštitu unutarnjih komponenti
- > Programibilna odgoda početka ciklusa
- > Senzor kvalitete vode
- > Sterilizacija nepakiranih instrumenata za samo 14 minuta zahvaljujući Lisa brzom ciklusu



Lisa

Više informacija
od stranice 17



»Lina za nas predstavlja idealan osnovni model za povoljno pripremanje instrumenata.«

Dr. Jakob Svoboda,
stomatolog s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Vrijeme sterilizacije može se upola smanjiti zahvaljujući kratkom ECO B ciklusu
- > Tih rad zahvaljujući patentiranom sustavu za odvajanje vode
- > Možete jednostavno navigirati kroz sve opcije u izborniku pomoću jednostavne tipkovnice
- > Ugrađeni filter za prašinu za zaštitu unutarnjih komponenti
- > Programibilna odgoda početka ciklusa
- > Izvrstan omjer uloženog i dobivenog



Lina

Više informacija
od stranice 19



»Promjena filtra bez mokrih stopala, potrebe za zvanjem vodoinstalatera i povlačenjem spremnika.«

Dr. Maria Boshamer,
veterinar s vlastitom ordinacijom

Prednosti na prvi pogled

- > Brža i jednostavnija zamjena uložka bez uporabe alata
- > Moguće je postaviti uložak bez pričvršćivanja
- > Pogodan za konvencionalne sterilizatore i uređaje za pripremu
- > Fleksibilna primjena zahvaljujući pištolju za raspršivanje
- > Nije potreban priključak na struju
- > Optimizirana ionski izmjenjiva smola
- > Čista voda odgovara preporukama i regulacijama za rad parnih sterilizatora i pripremu instrumenata



Multidem

Više informacija
od stranice 27

Assistina 3x3 / 3x2



Savršeno čišćenje iznutra i izvana

Čistoća izvana i iznutra. Već sada se možete usredotočiti na ono što vam je uistinu važno: vaše pacijente. Jer uređaj Assistina 3x3 automatski preuzima naporno pripremanje nasadnika, koljičnika i turbina za sterilizaciju.



Unutarnje čišćenje

Temeljito čišćenje svih dijelova pogona i unutarnjih komponenti omogućuje potpunu funkcionalnost svih instrumenata.



Vanjsko čišćenje (Assistina 3x3)

Uklanjanje organskih ostataka prije sterilizacije jamči sigurnost vaših pacijenata i zaposlenika.



Savršeno podmazivanje

Precizno automatsko podmazivanje svih dijelova pogona produžuje radni vijek instrumenata.



Rekordno vrijeme

Kratak ciklus od šest minuta skraćuje ukupno vrijeme pripreme instrumenata.



Jednostavna uporaba

Uređaj Assistina radi jednostavno, a priprema započinje pritiskom na tipku. Obuka nije potrebna.



Omjer uložnog i dobivenog

Vrhunski rezultat čišćenja uz male troškove nabave i štedljiv rad.

Assistina 3x2
3 instrumenta x 2 koraka za pripremu:
unutarnje čišćenje, podmazivanje

Assistina 3x3
3 instrumenta x 3 koraka za pripremu:
unutarnje čišćenje, vanjsko čišćenje, podmazivanje

Assistina 301 plus



Održavanje na dodir gumba

Jednostavno, praktično, sigurno. U uređaju Assistina 301 plus postupak njege izvodi se automatski: rotacijsko podmazivanje, unutarnje čišćenje i ispiranje, završno ispuhivanje komprimiranim zrakom. Nakon samo 35 sekundi instrument je savršeno obrađen. Time se značajno produžuje radni vijek instrumenata.



Automatsko rotacijsko podmazivanje
Ulje se optimalno raspodjeljuje te se stvara ravnomjeran sloj. Nečistoća se otapa i uklanja.



Automatsko doziranje ulja
Dozira se samo količina ulja potrebna za optimalno podmazivanje instrumenata. Ni više ni manje.



Rad bez struje
Uređaj Assistina 301 plus radi bez strujnog napajanja. Za rad je potreban priključak komprimiranog zraka.



Optimalno čišćenje
Uređaj Assistina 301 plus čisti i ispiru kanale za zrak i vodu sredstvom za čišćenje sredstvom za čišćenje i suši ih komprimiranim zrakom.



Optimalno podmazivanje
Čišćenje i podmazivanje unutarnjih dijelova uljem W&H Service Oil F1 produžuje radni vijek instrumenata.



Za savršeno ručno podmazivanje
W&H Service Oil F1, MD-400, ulje za raspršivanje, rezultat je W&H istraživanja.

Assistina 3x3 i Lisa Brzi ciklus



Sterilizacija u rekordnom vremenu

Očišćeno, pripremljeno, sterilizirano. Postupak čišćenja uređaja Assistina 3x3 u kombinaciji s Lisa Brzim ciklusom skraćuje ukupno vrijeme pripreme. Nakon 20 minuta svi instrumenti ponovno su Vam na raspolaganju.



Dezinfekcija brisanjem

Prije čišćenja i održavanja može biti potrebno izvesti dezinfekciju brisanjem.

Čišćenje i održavanje

U uređaju Assistina 3x3 tri se instrumenta za samo šest minuta čiste i pripreme s unutarnje i vanjske strane.

Sterilizacija

S pomoću Lisa Brzog ciklusa instrumenti su spremni za uporabu nakon samo 14 minuta i mogu se izvaditi iz sterilizatora.



Assistina 3x3 / 3x2

Proces čišćenja potvrđen je stručnim mišljenjem i može se pogledati na stranici wh.com.



Assistina 3x2


U uređaju Assistina 3x2 priprema instrumenata izvodi se u dva koraka: unutarnje čišćenje, podmazivanje.

Lisa



Preciznost i savršenstvo


Fleksibilno, učinkovito, brzo. Automatskim ciklusima B klase i ugrađenim sustavom sljedivosti Lisa sterilizator iz W&H postavlja nova mjerila u suvremenoj dentalnoj medicini.

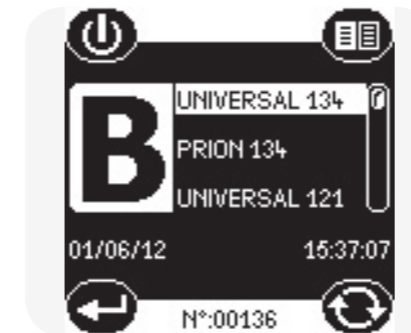

Ciklusi B klase
Automatskim ciklusima B klase Lisa vam jamči sigurnu sterilizaciju svih vrsta tereta.



Prilagođeno trajanje ciklusa
Prilagođavanje trajanja ciklusa količini tereta omogućuje uštedu vremena i produženje radni vijek instrumenata.

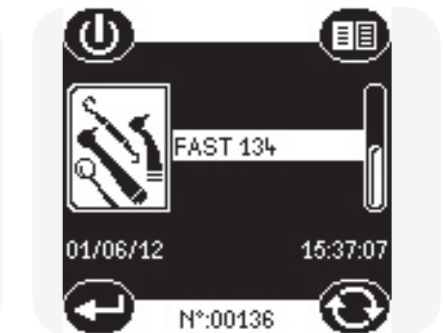

Brzi ciklus
Uz cikluse B klase uređaj Lisa opremljen je funkcijom 14-minutnog brzog ciklusa.



Jednostavna uporaba
Dodirni zaslon uređaja Lisa s intuitivnim izbornicima pruža vam brojne mogućnosti primjene.



Iskrpna dokumentacija
Integrirana automatska funkcija sljedivosti putem dodirnog zaslona omogućuje vam da svojim pacijentima posvetite više vremena.



Ugrađena memorijska kartica
Memorijska kartica s USB uređajem za očitavanje podataka dokumentira cikluse sterilizacije i testiranja. Za računalo nije potreban softver.

Lina



Bitne značajke sterilizacije

Jednostavno i proširivo. Lina je dodatak asortimanu W&H sterilizatora i s ciklusima B klase pruža vam maksimalnu sigurnost i izvrstan omjer uloženog i dobivenog.



Isključivo ciklusi B klase
Lina sterilizator radi isključivo s ciklusima B klase i za manje količine tereta s kratkim ECO B ciklusima.



Jednostavna navigacija
Zahvaljujući praktičnoj tipkovnici zajamčeno je jednostavno navigiranje do svih opcija sterilizacije.



ECO B program sterilizacije
Kod malih količina tereta i nepakiranih instrumenata moguće je dvostruko skratiti trajanje ciklusa.



Proširite sistem uz Multiport
Multiport omogućuje spremanje podataka o ciklusima sterilizacije na USB memoriju.



Pisač za naljepnice s barkodom
Za ispis naljepnica s barkodom potrebno je spojiti Multiport s pisačem za naljepnice LisaSafe.

Sljedivost postupaka



Mogućnost kontrole sljedivosti pritiskom prsta

Sljedivost, bespriječna, sigurna. Sustavom sljedivosti stvarate poveznicu između ciklusa sterilizacije i datoteke pacijenata. Time se osigurava bespriječan uvid u higijenski protokol.



Odabir ciklusa bez rizika

Jednostavna navigacija kroz izbornike omogućuje siguran odabir automatskih ciklusa sterilizacije.



Sigurni ciklusi

Sustav za procjenu postupka kontrolira sve aktualne parametre ciklusa i jamči uspješan rezultat sterilizacije.



Kontrola i odobrenje ciklusa

Sterilan teret prolazi kroz postupak kontroliranja i odobravanja. Protokol ciklusa automatski se sprema na memorijsku karticu.



Jednostavno označavanje

Ispisane naljepnice s barkodom postavljaju se na pakiranje steriliziranih instrumenata.



Skladištenje

Pakirani instrumenti upotrebljavaju se prema načelu First In – First Out (FIFO). Moraju se upotrijebiti prije datuma isteka.



Prijenos podataka

Podaci se učitavaju skenerom barkodova u datoteku pacijenta ili se na kartoteku pacijenta zalijepi naljepnica.

LisaSafe, Print, Sprint, LisaWare



Pribor za proizvode Lisa i Lina

Kompaktno, praktično, dobro. W&H nudi raznovrstan pribor za optimizaciju postupka sterilizacije. Mali dodaci daju značajne rezultate. Vaš će svakodnevni rad postati lakši, a vaš će tim uštedjeti vrijeme.



Pisač za naljepnice LisaSafe

Pisač za naljepnice omogućuje jednostavno i prikladno povezivanje podataka o ciklusu sterilizacije sa datotekom pacijenata.



Skener barkodova

U paket LisaSafe uključen je i skener barkodova. Njime možete skenirati naljepnice i povezati ih sa datotekom od pacijenta.



Softver LisaWare

Za automatsko spremanje protokola ciklusa na računalo izravno putem serijskog priključka ili lokalne mreže.



Print: Lisa

Iglični pisač za ispis ciklusa sterilizacije na standardne role papira.



Sprint: Lina

Za ispis protokola ciklusa na termopapir s 10-godišnjim jamstvom na papir.



Helix-Test


Helix-Test je sustav kontrolnog indikatora koji je namijenjen isključivo za sterilizatore B klase.

Seal²



Savršen postupak zavarivanja

Ekspresno pakiranje uz Seal². Teško je očuvati sterilnost proizvoda. Sterilnost se zadržava samo uz apsolutno hermetičnu i trajnu zaštitu od utjecaja okoline.

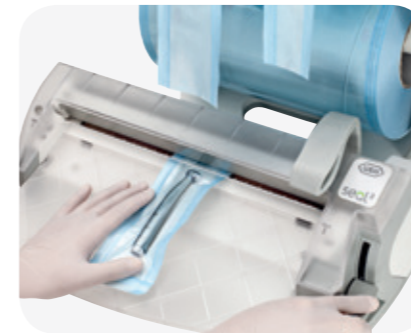

Seal²
Uređaj za zavarivanje folije stvara var širine 12 mm za samo 2 sekunde.



Hermetično zavarivanje
Temperatura zavarivanja regulira se elektronički i jamči savršeno hermetično zavarivanje.



Patentirani dvostruki držač rola
Patentirani dvostruki držač rola omogućuje rad s brojnim širinama rola.



Komfor i praktičnost
Rukovanje je optimizirano prozirnim zavarivačem i ugrađenom radnom površinom.



Fleksibilan rad
Držač rola može se skinuti sa stanice i postaviti na zid, čime omogućuje fleksibilan rad i u skučenom prostoru.

Multidem



Sustavi za tretman vode

Najčišća voda za sve sustave. Multidem stvara demineraliziranu vodu za stvaranje pare i može se primijeniti za brojne konvencionalne sterilizatore i uređaje za pripremu nasadnih instrumenata.



Praktično
Zamjena uložaka obavlja se brzo i bez alata. Uložak se može postaviti bez potrebe za pričvršćivanjem.



Kompatibilno
Multidem se može primijeniti za konvencionalne sterilizatore i uređaje za pripremu.



Praktično
Osim toga, Multidem je opremljen pištoljem za raspršivanje i idealan je za ispiranje instrumenata prije sterilizacije.



Štedljivo
Za Multidem nije potreban priključak na struju. Sadrži optimiziranu ionski izmjenjivu smolu.



Sigurno
Čista voda odgovara preporukama i regulacijama za rad parnih sterilizatora i pripremu instrumenata.

Osmo, Dist, Prim



Sustavi za tretman vode

Visokokvalitetna demineralizirana voda. Uporaba visokokvalitetne demineralizirane vode jamči ravnomjeran, optimalan učinak i produžuje radni vijek sterilizatora i instrumenata.



Osmo

Osmo puni i prazni više sterilizatora automatski i ravnomjerno.



Pištolj za raspršivanje

Osmo raspolaže pištoljem za raspršivanje za ručno punjenje drugih uređaja ili za ispiranje instrumenata prije sterilizacije.



Spremnik

Spremnik vode ima kapacitet od devet litara.



Dist

Za manje od 5 sati uređaj LisaDist proizvede 4 litre destilirane vode vrhunske kvalitete.



Prim

LisaPrim ispituje kvalitetu vode mjerenjem provodnosti.

W&H set adaptera za uređaje za čišćenje i dezinfekciju

Kompaktno, praktično, univerzalno. W&H set adaptera omogućuje jednostavnu, provjerenu, strojnu pripremu pribora i sitnih komponenti u termodezinfikatoru – iznutra i izvana.



W&H set adaptera

W&H set adaptera razvijen je specijalno za pripremu pribora i sitnih komponenti.




Provjereno čišćenje

Podržava provjereno unutarnje čišćenje i dezinfekciju šupljina, npr. špica za skidače kamenca ili cijevi za rashladno sredstvo.



Čišćenje unutarnjih i vanjskih navoja

Posebna struktura glave adaptera omogućuje čišćenje unutarnjih i vanjskih navoja.

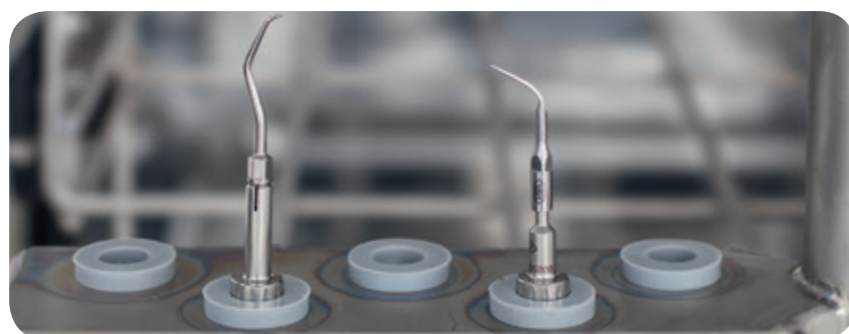

Univerzalno primjenjivo

Prikladno za sve kanale za ispiranje u uređajima za ispiranje i dezinfekciju sa unutarnjim navojem od 8 mm (M8x1) ili za to odgovarajućim gumenim umetkom.

W&H set adaptera prikladan je za sve špice s dimenzijama navoja M3x0,5 mm. Detaljan popis možete pronaći na stranici wh.com



Omjer uloženog i dobivenog

Vrhunska učinkovitost čišćenja i dezinfekcije uz male troškove nabave.

Assistina 3x3 / 3x2

CE

Tip:	3x3	3x2
Postupak:	unutarnje čišćenje, vanjsko čišćenje, podmazivanje	unutarnje čišćenje, podmazivanje
Prikladno za:	nasadnike, koljičnike, turbine, zračne mikromotore i zračne skidače zubnog kamenca	
Napajanje:	100-240 V	
Maks. potrošnja električne energije:	40 VA	
Potrošnja zraka:	oko 100 NI/min.	oko 60 NI/min.
Radni tlak:	5 do 10 bara (reguliranje ugrađenim, automatskim regulatorom tlaka)	
Visina/širina/dubina:	358 x 207 x 397 mm	
Kapaciteti spremnika:	1000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200	

Točne podatke o različitim adapterima za Assistina 3x3/3x2 uređaje možete pronaći na stranici wh.com



W&H Activefluid

Sredstvo za temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje instrumenata za primjenu uz uređaje Assistina 3x3/3x2.

W&H Service Oil F1

Optimalno podmazivanje dijelova pogona produžuje radni vijek preciznih nasadnih instrumenata.

Assistina 301 plus

CE

Tip:	Assistina 301 plus
Trajanje ciklusa:	oko 35 sekundi
Kapacitet spremnika za servisno ulje:	250 ml za pribl. 3500 ciklusa održavanja
Količina spremnika za sredstvo za čišćenje:	250 ml za pribl. 2500 ciklusa održavanja
Priključak:	priključak za komprimirani zrak s brzom okretnom spojkom za zračno crijevo Ø 6 x 4 mm, 1/8" unutarnji navoj
Radni tlak:	protočni tlak od 4 do 10 bara (automatsko reguliranje zraka)
Potrošnja zraka:	oko 60 l/min.
Visina/širina/dubina:	223 x 190 x 415 mm
Težina:	2,70 kg

Lisa



Tip:	Lisa
Napajanje:	200 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 10 A
Potrošnja energije:	2,0 – 2,4 kW
Vanjske dimenzije (Š x V x D):	450 x 435 x 599 mm
Težina:	Lisa 517: 43,9 kg Lisa 522: 46,2 kg
Srednja razina buke (L _{WA}):	62 dB
Spremnik za čistu / upotrijebljenu vodu:	4 / 3,5 litra
Radno područje:	7 do 11 ciklusa
Raspoloživ prostor u komori (Š x V x D):	17l: 195 x 205 x 300 mm 22l: 195 x 205 x 385 mm
Vrste priključaka:	1 paralelni priključak, 2 serijska priključka, integrirani ventil za automatski dovod vode i Ethernet/LAN (izborna)

Lina



Tip:	Lina
Napajanje:	220 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 8,75 A
Potrošnja energije:	1,75 kW
Vanjske dimenzije (Š x V x D):	450 x 435 x 599 mm
Težina:	Lina MB17: 38 kg Lina MB22: 40,5 kg
Srednja razina buke (L _{WA}):	63 dB
Spremnik za čistu / upotrijebljenu vodu:	4 / 3,5 litara
Radno područje:	4 do 7 ciklusa
Raspoloživ prostor u komori (Š x V x D):	17l: 195 x 195 x 297 mm 22l: 195 x 195 x 390 mm
Vrste priključaka:	1 serijski priključak, USB i 2 serijska priključka (izborna s Multiportom) i integrirani ventil za automatski dovod vode (izborna)

Multidem

Tip:	Multidem C17	Multidem C27
Radni tlak:	2 do 8,6 bara (maks.)	
Temperatura ulazne vode:	4 – 30 °C / 40 – 86 °F	
Nazivni protok:	60 l/h	
Kvaliteta izlazne vode:	demineralizirano (EN 13060)	
Kvaliteta ulazne vode	pitka voda	
Težina:	1,7 kg	2,7 kg
Širina/dubina/visina:	117 / 108 / 421 mm	124 / 123 / 476 mm
Radni položaj:	okomito	
Dužine crijeva:	2 x 3 m	
Sigurnosni ventil:	da	
Bespovratni ventil:		

Osmo


Tip:	Osmo
Dimenzije (Š x D x V) u mm:	520 x 200 x 420
Težina:	11,0 kg
H ₂ O-tlak:	1 – 5 bara

Seal²


Tip:	Seal ²
Napajanje:	200 – 240 V / 100 W
Dimenzije (Š x D x V) u mm:	452 x 480 x min 315 – maks 420
Težina:	7,1 kg

Pregled adaptera za uređaj – Assistina 3x3/3x2

Nasadnici i koljičnici

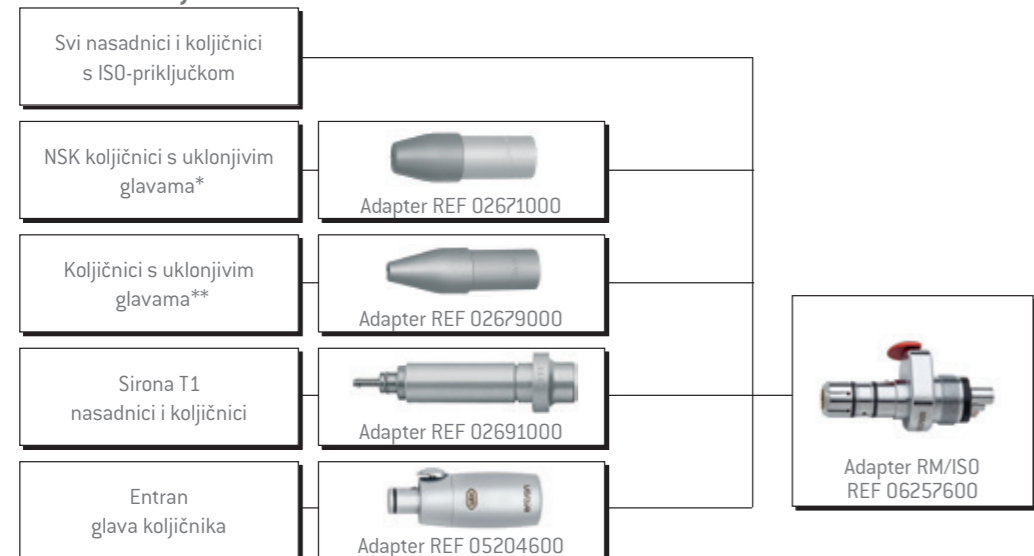

Turbine

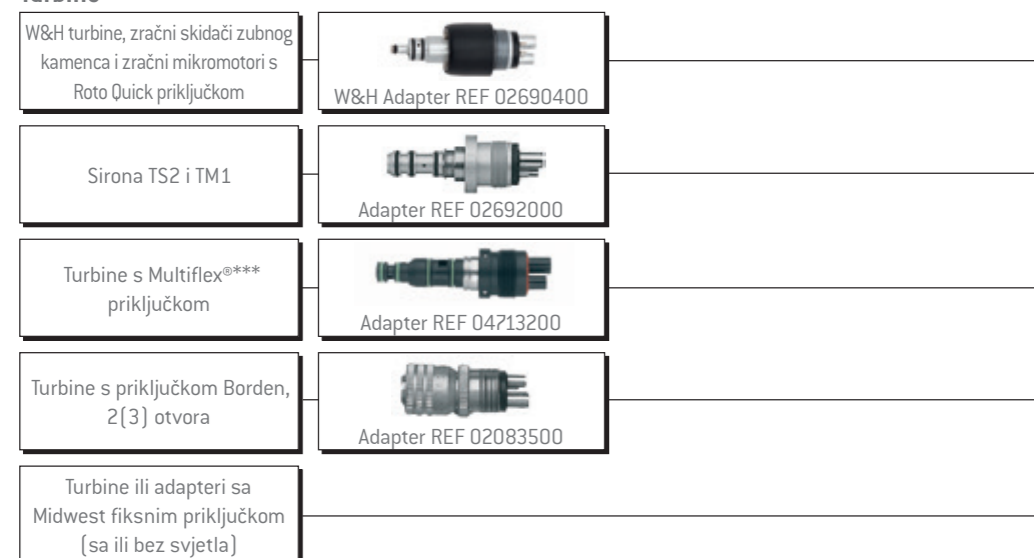

*) isključivo za sljedeće tipove:

Phatelus glave
 ARS-PTL NFB-PTL
 EVA-PTL NM-PTL
 TE-PTL NPB-PTL
 VM-PTL NRS-PTL

**) isključivo za sljedeće tipove:

LN/CN glave
 3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN
 3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN
 4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD
 22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD 3 D


A glave
 52 3 LDSY 53 GDN 6 GD
 79 4 G 61 G 67 CN
 80 31 GR 62 GDN 68 CDN
 53 G 62 GN 68 CN

Kirurške glave
 67 H
 67 IC


***) Multiflex® je registrirana robna marka firme Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Njemačka

Pregled adaptera za uređaj – Assistina 301 plus

Nasadnici i koljičnici

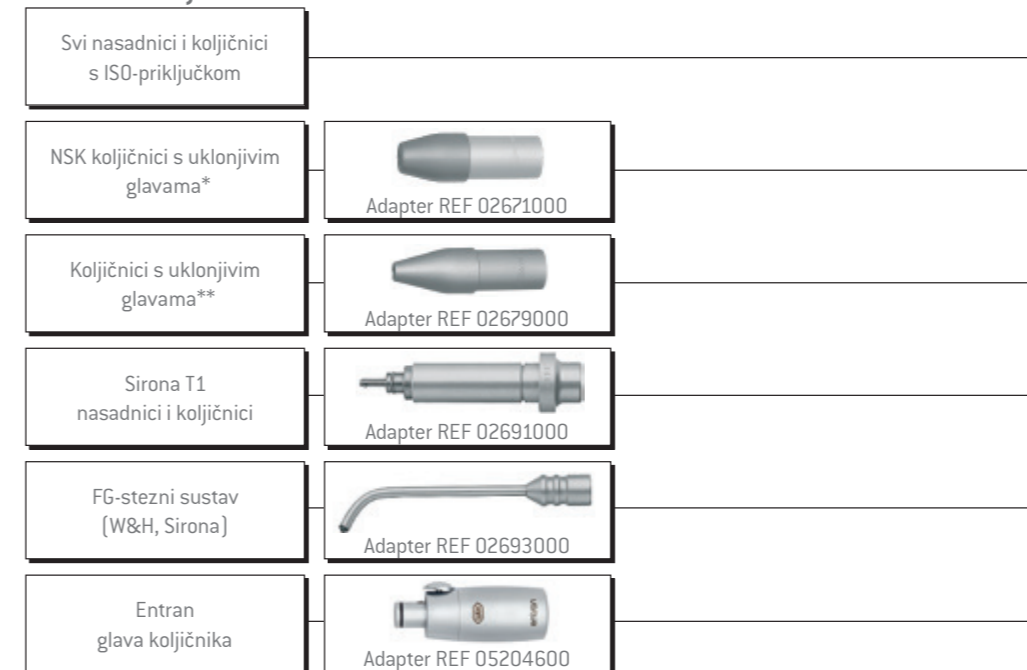

Turbine

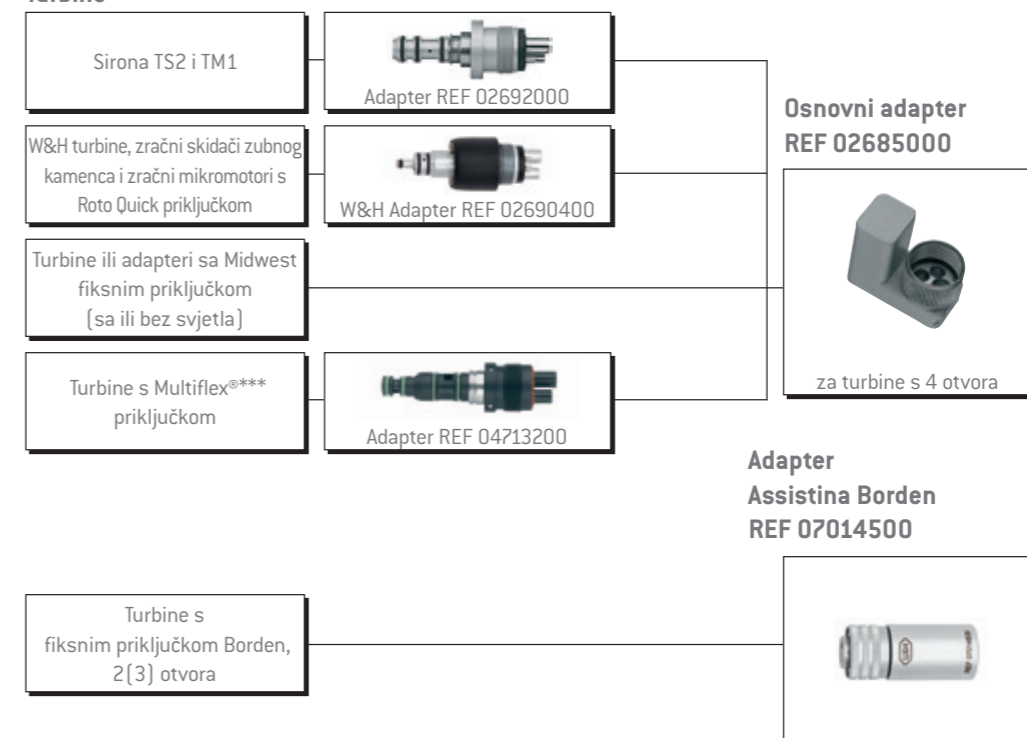

*) isključivo za sljedeće tipove:

Phatelus glave
 ARS-PTL NFB-PTL
 EVA-PTL NM-PTL
 TE-PTL NPB-PTL
 VM-PTL NRS-PTL

**) isključivo za sljedeće tipove:

LN/CN glave
 3 LD 22 LB 53 LS 61 LF 67 LDN
 3 LDSY 31 LR 61 LA 61 LR 68 LDN
 4 L 52 LDN 61 LB 62 LDN 80 LD
 22 LA 53 LDN 61 LC 66 LD 3 D

A glave
 52 3 LDSY 53 GDN 6 GD
 79 4 G 61 G 67 CN
 80 31 GR 62 GDN 68 CDN
 53 G 62 GN 68 CN

Kirurške glave
 67 H
 67 IC

***) Multiflex® je registrirana robna marka firme Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Njemačka

Sterilizacija, higijena i održavanje

Slike služe samo kao ilustracija. Dodatna oprema i sadržaj prikazanih dijelova pribora ne isporučuje se uz proizvod.

Skenirajte QR kôd
mobilnim telefonom i
saznajte više o našim
proizvodima



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com